

Welk type



bent u?

*gymna.***PRO**

gymna[®]

*gymna.**PRO**, welk type PRO bent u?*

Bent u eerder een doener of een denker?

Houdt u van kunst of van sport, of van beide?

ONGETWIJFELD BENT U UNIEK.

*Toch hebt u iets gemeenschappelijk met andere
fysiotherapeuten:*

uw professionalisme.

*Met gymna.**PRO** stelt u zelf uw unieke behandeltafel samen.*

De keuze is aan u.







Your table. Your choice

10 verschillende configuraties en zelfs nog meer opties om de gymna.**PRO** te creeëren die het best bij uw smaak en behoeften past.


2-delige tafels

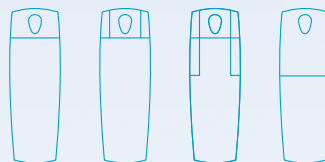

3-delige tafels

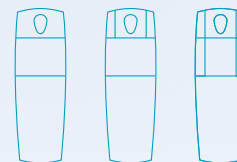

4-delige tafels

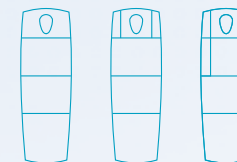

*DAT IS DE FLEXIBILITEIT DIE GYMNA.**PRO** U BIEDT*

*gymna.**PRO***

Your table. Your choice

Mijn **gymna.PRO**, keuzevrijheid en elegant ontwerp

Ik heb net een nieuwe Osteopathie-praktijk geopend en had daardoor de mogelijkheid om een professionele en eigentijdse werkomgeving te creëren

Voor mij als osteopaat, is mijn behandeltafel de ruggengraat van mijn praktijk.

Het is belangrijk dat ik van heel dichtbij met mijn patiënt kan werken. Ik behandel mijn patiënten meestal in een vlak liggende houding en heb geen complexe kussenaanpassingen nodig.

**EEN TWEEDELIGE TAFEL VAN GOEDE
KWALITEIT IS PRECIES WAT IK NODIG HEB.**

Het moment dat ik de gymna.PRO tegenkwam, wist ik dat ik had gevonden wat ik nodig had. Een elegante en toch stabiele 2-delige tafel met zijsteunen die me de mogelijkheid biedt om van dichtbij op mijn patiënt te werken.

Dat is waarom ik de gymna.PRO kies, elegant ontwerp, samen met de vrijheid om elke optie te kiezen die ik nodig had.



“Mijn gymna.PRO is elegant,
met alleen de opties die ik nodig heb,
soms is minder echt meer”



Lateraalsteunen

Dit is hoe ik onze gymna.PRO heb
geconfigureerd

2-delige tafels	D6		
Features en options	i-Control	Foot switch	Hydraulic
Linear kussens	●	●	●
Classique bekleding	●	●	●
Breedte 67 cm	●	●	●
Hoofddeel manueel	●	●	●
“One-Click” armsteunen met Ergomax	●	●	●
Lateraalsteunen	●	●	●
Rugdeel manueel			
Veiligheidsschakelaar	●	●	
Gezichtsopening met Ergomax			
Wielen	○	○	○
Breedte 60 cm			
Breedte 77 cm			
Progressief kussens	○	○	○
Premium bekleding	○	○	○
Kussenverwarming	○	○	
Safe Motion Detection	○	○	
LED pack	○	○	
Memory	○	○	
Batterij	○	○	



Veelzijdigheid staat centraal in onze praktijk en **gymna.PRO** biedt dat

In onze groepspraktijk, met veel verschillende specialisaties, was het een uitdaging om een behandeltafel te kiezen die aan al onze behoeften voldeed.

Sportmassage is een groot deel van mijn werk en het is van cruciaal belang om een behandeltafel te hebben die stabiel is. De gymna.PRO met zijn ongeëvenaarde Gymna-stabiliteitsprofiel voldoet precies aan deze behoeften.

Een grote stap voorwaarts voor patiënten met beperkte mobiliteit is de zogenaamde Constant Patient Position, een nieuw Gymna-concept. De patiënt hoeft tijdens de behandeling niet te draaien in zit-, lig- en Kyphose-positie, waardoor het veiliger en gemakkelijker voor hen wordt en ook de hygiëne verbetert.

gymna.PRO



Traditional



Het veiligheidsaspect is ook erg belangrijk in onze praktijk. We hebben gekozen voor 'Safe Motion Detection', een automatisch veiligheidssysteem dat voorkomt dat mensen gekneld geraken in het hoogte-instellingsmechanisme van de tafel.

“ In mijn gymna.PRO vond ik de onvergelykbare stabiliteit die ik nodig heb voor succesvolle behandelingen.”



Constant Patient Position

Gymna Stability Profile

Safe Motion Detection

Dit is hoe ik onze gymna.PRO heb geconfigureerd

3-delige tafels

T5

Features en opties

Linear kussens

Classique bekleding

Breedte 67 cm

Hoofddeel manueel

Lumbale flexie manueel

Rugdeel manueel

“One-Click” armsteunen met Ergomax

Lateraalsteunen

Veiligheidsschakelaar

Gezichtsopening met Ergomax

Wielen

Lumbale flexie gemotoriseerd

Rugdeel gemotoriseerd

Breedte 60 cm

Breedte 77 cm

Progressief kussens

Premium bekleding

Kussenverwarming

Safe Motion Detection

LED pack

Memory

Batterij

i-Control

Foot switch

Hydraulic

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



De flexibiliteit om mijn eigen **gymna.PRO** samen te stellen

In mijn praktijk behandel ik voornamelijk vrouwelijke patiënten met bekkenbodemp Problemen.

Hoewel het heel vaak voorkomt, is het nog steeds niet zo vanzelfsprekend om over dit soort problemen te praten. Vrouwen

ALS PROFESSIONAL WIL IK ALLES DOEN OM HEN TE HELPEN ZICH TOCH OP HUN GEMAK TE VOELEN.

zijn vaak gespannen wanneer ze voor een behandeling komen. Deze spanning kan mijn behandeling negatief beïnvloeden.

Een onderdeel daarvan is dat mijn praktijk er betrouwbaar en comfortabel uitziet, en ook professioneel is. Daarom heb ik veel aandacht besteed aan het interieurontwerp en wilde ik mijn behandeltafel als een geïntegreerd onderdeel van mijn praktijk hebben. De tafel moest alle opties bieden die ik nodig heb om de professionele behandeling uit te voeren waar ik naar streef.

Ik heb voor gymna.PRO gekozen vanwege zijn kwaliteit en flexibiliteit; met al zijn opties heb ik mijn eigen unieke behandeltafel samengesteld.

Ik kon de onvergelojkbare Gymna-stabiliteit combineren met het zachte en naadloze Ergomax-gezichtskussens en het unieke draadloze verwarmingssysteem. Mijn patiënten waarderen het comfort van mijn gymna.PRO.

“Met de kwaliteit en flexibiliteit van gymna.PRO kan ik de resultaten bereiken die ik nodig heb voor mijn patiënten”



Dit is hoe ik mij gymna.PRO heb geconfigureerd

4-delige tafels

Q8

Features en opties

Linear kussens	●	●
Classique bekleding	●	●
Breedte 67 cm	●	●
Hoofddeel manueel	●	●
Onderbeendeel manueel	●	●
Rugdeel gemotoriseerd	●	●
Zitdeel gemotoriseerd	●	●
“One-Click” armsteunen met Ergomax	●	●
Lateraalsteunen	●	●
Veiligheidsschakelaar	●	●
Gezichtsopening incl.Ergomax		
Wielen	○	○
Breedte 60 cm		
Breedte 77 cm		
Progressief kussens	○	○
Premium bekleding	○	○
Kussenverwarming	○	○
Safe Motion Detection	○	○
LED pack	○	○
Memory	○	○
Batterij	○	○

i-Control

Foot switch

*gymna.***PRO**

Premium Essentials

*gymna.**PRO** verenigt Gymna's jarenlange ervaring in de ontwikkeling van behandeltafels met de ervaring van professionals die deze producten dagelijks gebruiken. Elke fysiotherapeut heeft bepaalde functionaliteiten nodig om patiënten goed te kunnen behandelen.*

Dit resulteerde in een reeks PREMIUM ESSENTIALS.

MET PREMIUM

ESSENTIALS HEEFT GYMNA DEZE FUNCTIONALITEITEN VERDER VERBETERD EN ZE NAAR EEN HOGER NIVEAU GEBRACHT.






Premium Essentials




Constant Patient Position

Vermijdt het lastige draaien van patiënten
Onze 3-delige tafel met «One-Click» systeem maakt liggen, zitten en kyfose mogelijk zonder dat de patiënt moet worden gedraaid. Betere hygiëne omdat de voeten niet op het hoofdvlak van de 3-delige tafel liggen.

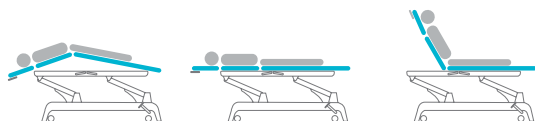


Safe Motion Detection

Volledig automatisch veiligheidssysteem
Ontworpen om het risico dat mensen gekneld geraken in het hoogte-instellingsmechanisme van de tafel te beperken.

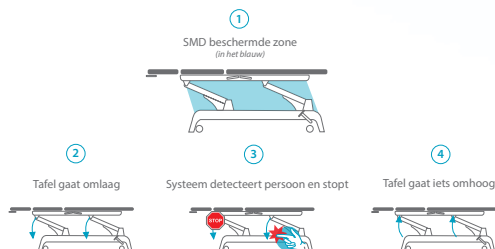

Armsteunen

‘One-clicksysteem’ voor een gemakkelijke bediening
De twee steunen worden gelijktijdig naar beneden gebracht en licht gekanteld voor een meer ontspannen nek- en schouderzone in buikligging.

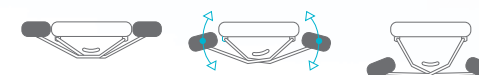



Gymna Stability Profile

Minimale buiging en beweging onder belasting

Solide en stabiele constructie, waarbij tijdens de behandeling de manipulatiekracht dezelfde intensiteit behoudt zonder energieverlies.



Ergomax

Maximaliseer comfort en hygiëne

Voorzien van een hartvormige opening die ogen en mond vrijlaat. Het Ergomax gezichtskussen is zacht, naadloos, waterbestendig en wasbaar. Tweezijdig en dus geschikt voor patiënten van elke grootte.



Lateraalsteunen

Bieden nog meer bewegingsvrijheid voor de therapeut

Deze steunen maken het mogelijk een ideale werkhouding te handhaven, dicht bij de patiënt, zonder spanning op de schouders of de rug.

Premium Essentials



i-Control

Intelligent voetbediend hoogte-instellingssysteem

Voor gemakkelijke, nauwkeurige en veilige hoogte-instelling van om het even waar rond de tafel.

Programmeerbare geheugenfunctie

Gemakkelijk en efficiënt automatische hoogteverstelling met 3 programmeerbare geheugeninstellingen.



Extra motoren

Moeiteloze instelling voor therapeut

De gymna.PRO kan uitgerust worden met extra motoren. Om de kussens te verstellen, drukt u eenvoudig op een knop. Deze optie biedt zowel comfort voor de patiënt, die zich niet hoeft uit te strekken als voor de therapeut.



Batterij

Verbetert ambulant gebruik van gymna.PRO

Volledig in het frame geïntegreerd met een plug-in verwijderbare kabel. De batterij wordt opgeladen wanneer de tafel opnieuw aangesloten wordt.



Draadloze kussenverwarming

Twee verwarmingspads in de kussens

Bieden comfortabele warmte voor het welzijn van uw patiënt en voor een aangename werkomgeving. Gymna kussenverwarming voldoet aan de MDD.



LED pack

Voor een extra sfeer in uw praktijk.

Het led-pack creëert een aangename en sfeervolle verlichting onder het frame en zorgt voor functionele ondersteuning. Werkt met een speciale IR-afstandsbediening met een AAN- en UIT-knop.



Kussens en uitvoeringen

Kies de uitvoering die bij uw voorkeuren en behoeften past.

Kies zelf de dichtheid, de kleur, het materiaal en stiksel, breedte en verwarming van uw kussens.

Classique (PVC)



Premium (Polyurethane)



gymna.PRO

Technische gegevens

gymna.PRO is ontworpen om de therapeut maximale flexibiliteit en keuze mogelijkheden te geven.

10 verschillende configuraties en zelfs nog meer opties om de gymna.PRO te creëren die het best bij uw smaak en behoeften past.




Technische specificaties

Afmetingen	206 x 67 cm
Gewicht	± 95 – 110 kg (model depending)
Hoogteverstelling	± 47 – 97 cm
Hefcapaciteit	max. 200 kg
Netspanning	100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Stroomverbruik	max. 3,0 A (model depending)
Isolatieklasse	II
Apparaatclassificatie	I
Aangebrachte onderdelen	Type BF
Vochtbestendigheid	IP21
Motorgebruik	max. 2 minutes on / 18 minutes off
Conformiteit	IEC/EN 60601-1:2012 ed. 3.1 IEC/EN 60601-2: 2014 ed. 4.0 93/42/EEC WEEE RoHS2



2-delig

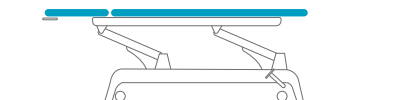

Uitrusting en opties


	D1			D2			D4			D6		
	i-Control	Foot switch	Hydraulic	i-Control	Foot switch	Hydraulic	i-Control	Foot switch	Hydraulic	i-Control	Foot switch	Hydraulic
Linear kussens	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Classique bekleding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Breedte 67 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoofddeel manueel				●	●	●	●	●	●	●	●	●
"One-Click" armsteunen met Ergomax							●	●	●	●	●	●
Lateraalsteunen										●	●	●
Rugdeel manueel	●	●	●									
Veiligheidsschakelaar	●	●		●	●		●	●		●	●	
Gezichtsopening met Ergomax	○	○	○	○	○	○						
Wielen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Breedte 60 cm	○	○	○	○	○	○						
Breedte 77 cm	○	○	○	○	○	○						
Progressief kussens	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Premium bekleding	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kussenverwarming*	○	○		○	○		○	○		○	○	
Safe Motion Detection	○	○		○	○		○	○		○	○	
LED pack	○	○		○	○		○	○		○	○	
Memory **	○	○		○	○		○	○		○	○	
Batterij	○	○		○	○		○	○		○	○	

10 verschillende configuraties

2-delig



3-delig

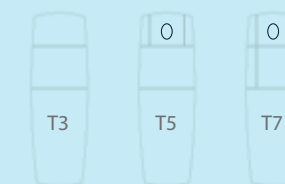


4-delig



- Standaard
- Optie
- * Kussenverwarming alleen in combinatie met progressief kussen
- ** Memory altijd in combinatie with Gymna SMD

3-delig

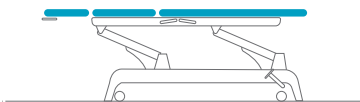

Uitrusting en opties


	T3			T5			T7		
	i-Control	Foot switch	Hydraulic	i-Control	Foot switch	Hydraulic	i-Control	Foot switch	Hydraulic
Linear kussens	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Classique bekleding	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Breedte 67 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hoofddeel manueel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lumbale flexie manueel***	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rugdeel manueel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
"One-Click" armsteunen met Ergomax				●	●	●	●	●	●
Lateraalsteunen							●	●	●
Veiligheidsschakelaar	●	●		●	●		●	●	
Gezichtsopening met Ergomax	○	○	○						
Wielen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lumbale flexie gemotoriseerd	○	○		○	○		○	○	
Rugdeel gemotoriseerd	○	○		○	○		○	○	
Breedte 60 cm	○	○	○						
Breedte 77 cm	○	○	○						
Progressief kussens	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Premium bekleding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kussenverwarming*	○	○		○	○		○	○	
Safe Motion Detection	○	○		○	○		○	○	
LED pack	○	○		○	○		○	○	
Memory**	○	○		○	○		○	○	
Batterij	○	○		○	○		○	○	

- Standaard
○ Optie

- * Kussenverwarming alleen in combinatie met progressief kussen
** Memory altijd in combinatie with Gymna SMD

*** Model ook beschikbaar zonder flexion

4-delig

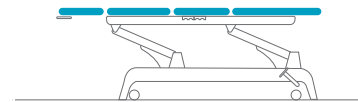

Uitrusting en opties

	Q4		Q6		Q8	
	i-Control	Foot switch	i-Control	Foot switch	i-Control	Foot switch
Linear kussens	●	●	●	●	●	●
Classique bekleding	●	●	●	●	●	●
Breedte 67 cm	●	●	●	●	●	●
Hoofddeel manueel	●	●	●	●	●	●
Onderbeendeel manueel	●	●	●	●	●	●
Rugdeel gemotoriseerd	●	●	●	●	●	●
Zitdeel gemotoriseerd	●	●	●	●	●	●
"One-Click" armsteunen met Ergomax			●	●	●	●
Lateraalsteunen					●	●
Veiligheidsschakelaar	●	●	●	●	●	●
Gezichtsopening met Ergomax	○	○				
Wielen	○	○	○	○	○	○
Breedte 60 cm	○	○				
Breedte 77 cm	○	○				
Progressief kussens	○	○	○	○	○	○
Premium bekleding	○	○	○	○	○	○
Kussenverwarming*	○	○	○	○	○	○
Safe Motion Detection	○	○	○	○	○	○
LED pack	○	○	○	○	○	○
Memory**	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○

Kussens en uitvoeringen

Kies de uitvoering die bij uw voorkeuren en behoeften past.

Kies zelf de dichtheid, de kleur, het materiaal en stiksel, breedte en verwarming van uw kussens.

Linear

Soepele en comfortabele kussens met 40 mm polstering

- Lineaire weerstand
- Standaardsteek (Premium)

Progressief

Stevige, maar comfortabele kussens met duo-polstering

- Progressieve weerstand
- Zadelsteek
- Ideaal voor manuele therapie



Kies uw kleur en materiaal

De kussens zijn bekleed met ftalaatvrij en biocompatibel materiaal van hoge kwaliteit. Kies Premium kwaliteit voor een lederlook en feel.

Classique (PVC)

Anthracite	Navy	Grey	Coffee	Cashmere
Sahara	Titanium	Blue	Sky	Cherry
Violet	Apricot	Green	Pistacio	Pink

Garantie Classique stoffering: 1 jaar

Premium (Polyurethane)

Ink Black	Ash Black	Midnight Blue	Warm taupe
Ruby Red	Caramel Latte	Ivory White	Dark Chocolate

Garantie Premium stoffering: 3 years

Cryotherapie



TECAR & Diathermie



Shockwave Therapie



Physio Care



Behandelbanken



Elektrotherapie



Active Motion



Uw verdeler

gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511