

gymna[®]

SPECIAL EDITION

gymna.GO Carbon Black



Basically Perfect.
Now Boldly Black.



Ontdek de gymna.GO

Carbon Black Editon

De populairste Gymna behandeltafel is nu verkrijgbaar in een exclusieve Carbon Black Edition.

Het robuuste zwarte frame en de bijpassende bekleding geven je praktisch een krachtige, moderne uitstraling, zonder in te leveren op comfort en gebruiksgemak.

Kies jouw uitvoering:



gymna.GO D1



gymna.GO T3x



gymna.GO T5x

Design dat opvalt.
Prestaties die overtuigen.



Carbon Black

Deze speciale editie is beschikbaar vanaf eind 2025.



Waarom kiezen voor **de Carbon Black Edition?**

- **Design met karakter:** de donkere afwerking straalt professionaliteit en stijl uit.
- **Makkelijk te verplaatsen:** vier zwenkwielen met vergrendeling maken verplaatsen soepel en veilig.
- **Slimme hoogteverstelling:** Met het innovatieve i-Control systeem pas je de hoogte rondom de tafel aan, zonder je werk te onderbreken.
- **Hygiënisch comfort:** het Ergomax gezichtskussen is waterbestendig, wasbaar en ergonomisch gevormd voor maximaal comfort.

Comfort dat je voelt. **Kwaliteit die je merkt.**

Gemaakt voor intensief gebruik

De gymna.GO Carbon Black Edition wordt geproduceerd in de bekroonde 'fabriek van de toekomst'. Met robotgelaste frames, duurzame poedercoating en onderhoudsvrije lagers krijg je een tafel die jarenlang soepel en stil blijft werken, zelfs in drukke praktijken.

Materialen die het verschil maken

De kussens zijn bekleed met premium kunstleder in een diepzwarte kleurstelling met lederlook- en feel. De vulling van duurzaam PE-schuim zorgt voor optimale ondersteuning en comfort, zelfs bij langdurige behandelingen.





Gemaakt om
elke dag te presteren



Standaard inbegrepen

Ergomax gezichtskussen

Maximaal comfort, optimale hygiëne

Het Ergomax gezichtskussen biedt maximale hygiëne en comfort:

- Hartvormige opening voor vrije ademhaling
- Zachte, naadloze afwerking
- Dubbelzijdig te gebruiken, passend bij iedere lichaamsbouw
- Waterbestendig, afneembaar en eenvoudig schoon te maken






Ready to GO?
Now boldly black.


Specificaties

Kenmerk	gymna.GO Carbon Black
Afmetingen	205 x 67 cm (l x b)
Gewicht	circa 78 kg (D1) / 79 kg (T3x) / 81 kg (T5x)
Hoogteverstelling	50 – 100 cm
Hefvermogen	Max. 200 kg
Motorkracht	6 kN
Motorgebruik	2 min aan / 18 min uit
Netspanning	230 / 120 / 100 VAC
Stroomverbruik	Max. 2,0 A
Frame	Staal, poedercoating RAL 9004 (zwart)
Kussenafwerking	Lineair, enkel gewatteerd 40 kg/m ³
Bekleding	Premium PU Ink black
Apparatenclassificatie	Klasse I
Garantie	3 jaar tafel, 3 jaar bekleding


gymna.GO D1

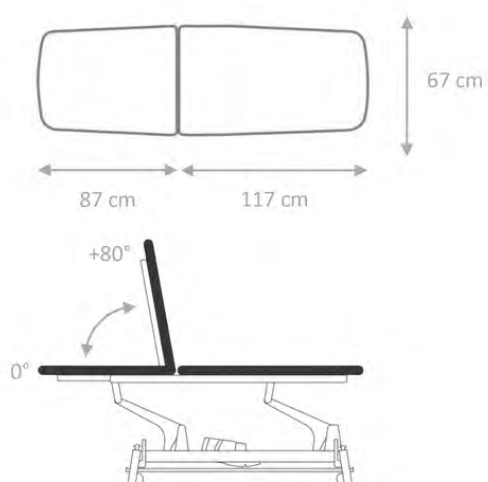

gymna.GO T3x

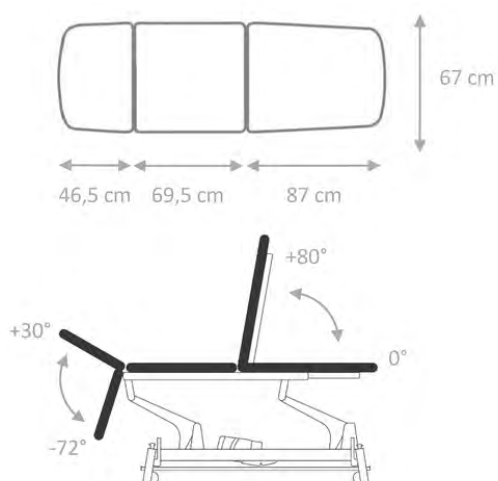

gymna.GO T5x

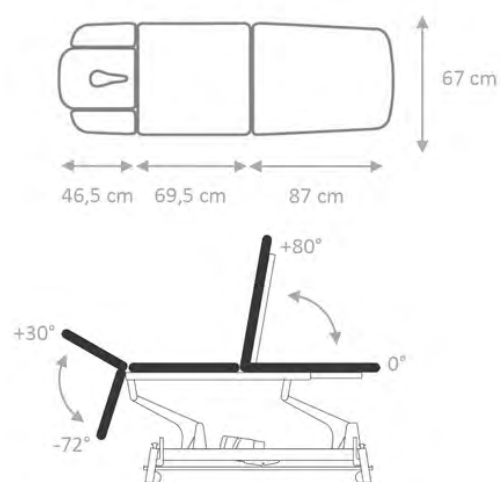

gymna.GO

Carbon Black Edition

www.gymna.nl



Advies nodig? Neem contact op met Gymna Nederland.

Gymna Nederland Park Forum 1106 Eindhoven

Mail: info@gymna.nl
Tel: 085 902 9830

Meer weten of
direct bestellen?
www.gymna.nl

www.gymna.nl

gymna